





































M2720A Avalon CTS Snoerloos Foetaal Transducer Systeem

Waarschuwingen en wat u ermee kunt doen

Basisstation waarschuwingen:  knippert, alleen of met lampjes aan beide kanten.  betekent lampje is uit/continu aan.

 betekent auditief alarm, indien ingesteld. Met  stil zetten.

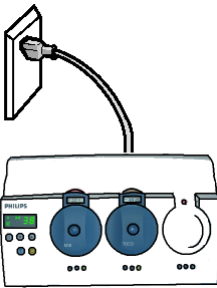
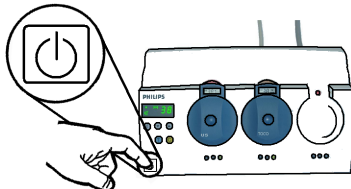
Transducer waarschuwingen:  knippert samen met het symbool om de probleembron aan te duiden.

| Als u deze waarschuwing ziet... | | ...handel dan als volgt... |
|--|--|--|
| ...op het basisstation... | ...op de transducer... | |
|    +  | | Dock de transducer om de batterij op te laden, of vervang de transducer door een geladen exemplaar. |
|    +  |  +  | Als het probleem, ook na een oplaadtijd van 30 minuten blijft, vervang dan de batterij in de transducer. (zie Service Guide.) |
|    +  | | Controleer of de transducer actief is en binnen het ontvangstbereik. Controleer de antenne aansluiting. |
|    |  +  | Druk 2 seconden op  om het geblokkeerde slot vrij te maken. |
|  voorbeeld bedlabel |  +  + -- | Dit slot heeft een actieve transducer (met bedlabel 38 in dit voorbeeld). |
|  voorbeeld bedlabel |  +  +  voorbeeld bedlabel | Hetzij eerst deze terugplaatsen om het slot beschikbaar te maken of, als de transducer een bedlabel toont (16 in dit voorbeeld), deze naar zijn eigen basisstation terugbrengen. |
| |  +  | Waarschuw een technicus (transducer kon niet geregistreerd worden). |
| |  +  | Als het een actieve ECG transducer betreft, kabel aansluiten. Plaats de transducer in het slot dat met het rondje aangegeven is (transducer in verkeerde slot). |
| Basisstation en transducer foutmeldingen (E0 tot E9): zie <i>Gebruiksaanwijzing</i> | | |

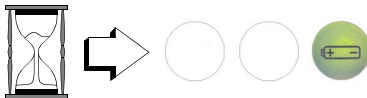


M2720A Avalon CTS Snoerloos Foetaal Transducer Systeem

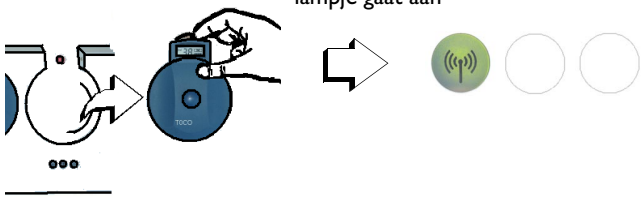
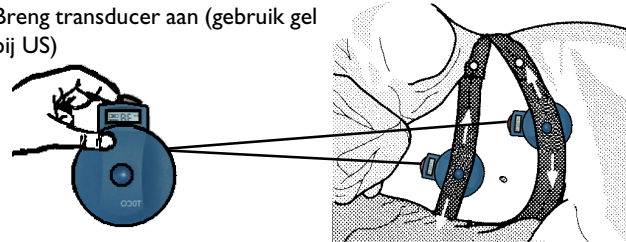
Wegwijzer

- 1** 110 - 240 V AC

- 2** Aanzetten

- 3**


TELE


Controleer of op het CTG-apparaat "TELE" aangegeven is als aanduiding van een goede verbinding met het Avalon CTS
- 4** Wacht op "gereed" lampje

- 5** Verwijder transducer


"Gereed" lampje gaat uit: "RF Link" lampje gaat aan

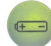

- 6** Breng transducer aan (gebruik gel bij US)


Zet hem vast zodra u een goed signaal hebt:


 bij Avalon CTG-apparaten


 bij serie 50 CTG-apparaten

| Overgaan van ultrasound op direct ECG bewaking | |
|--|---|
| 1 | Dock de US transducer. |
| 2 | Haal de ECG transducer eruit als het lampje  voor dat slot groen brandt. |
| 3 | Sluit de direct ECG adapterkabel en foetale schedelelektrode op de ECG transducer aan. |
| 4 | Start met de direct ECG bewaking. |

| Overgaan van direct ECG op ultrasound bewaking | |
|--|--|
| 1 | Ontkoppel de direct ECG adapterkabel en foetale schedelelektrode van de ECG transducer. |
| 2 | Dock de ECG transducer. |
| 3 | Haal de US transducer eruit als het lampje  voor dat slot groen brandt. |
| 4 | Start met ultrasound bewaking. |

Ontkoppel alle transducers met snoer van het CTG-apparaat alvorens het Avalon CTS te gebruiken.

Twee actieve transducers die FHF versturen naar hetzelfde basisstation veroorzaken de foutmelding **E9**. Dock één van de transducers om de fout op te heffen.

Na gebruik: transducers reinigen en dan in het betreffende slot van het basisstation plaatsen.